




Ankergeschiebe


Das Ankergeschiebe ist ein aktivierbares, starres und präzises Halte- und Stützelement mit hervorragender Schubverteilung.



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ankergeschiebe	6480 6000

Einzelteile Maßstab 1 : 1	Bezeichnung	Höhe in mm	Werkstoff	Artikel-Nr.
	Patrize	5,0	11	6480 1066
	Zapfen	3,30	11	6480 0601
	Matrize aus Kst. mit Pt-Ir-Öse	6,5	2	6480 1065

Hilfswerkzeug	Artikel-Nr.
Parallelhalter	6480 6461

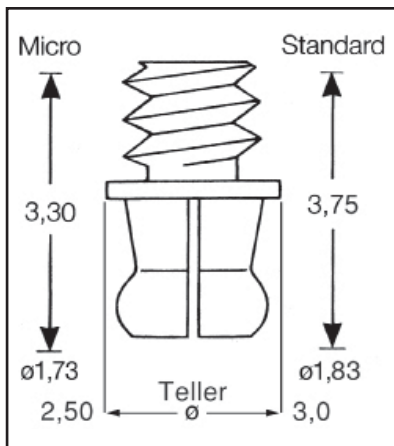

Das Anker-System basiert auf dem Druckknopfprinzip und ist ein bewährtes Halteelement für die gesamte abnehmbare partielle Zahnprothetik. Es besteht aus präzise gefertigten Einzelteilen. Die verwendeten hochwertigen Edelmetalllegierungen garantieren eine lange Lebensdauer.

Indikation

Freiend- und Schaltprothetik, kombinierte Prothesen sowie abnehmbare Brücken. Für normale Bissverhältnisse steht unser Anker-„Standard“ zur Verfügung, für extreme Platzverhältnisse kommt das Vario-System „Mikro“ zur Anwendung. Die Anker „Standard“ und „Mikro“ werden in verschiedenen Ausführungsformen geliefert. Für die Verarbeitung sind dabei besonders zu unterscheiden:

- Kunststoffstege, die mit der Wachsmodellation der benachbarten Kronen eingebettet werden
- das Vario-System
- angussfähige Gewindekappen aus Pt-Ir für Edelmetall- und Nichtedelmetalllegierungen
- Schraubringe für die einfache Verarbeitung ohne Lötung
- Gewinderinge für die Verankerung in Kunststoff