




PontiLock* Schraubensystem

Das PontiLock ist eine Verschraubung die bei Brückenteilung, divergierenden Pfeilern, Befestigungen bedingt herausnehmbaren Zahnersatzes, sowie der Versorgung mit Suprakonstruktionen auf Implantaten indiziert wird. Die Hülse sowie der Überfallring bestehen aus einer Pt-Ir-Legierung. Bedingt durch das hohe Schmelzintervall ist ein Anguss an alle Edelmetall-Legierungen sowie Nichtedelmetall-Legierungen möglich.

Fixationsstifte werden mitgeliefert.

Anwendungsbereich:

- Befestigung von bedingt herausnehmbarem Zahnersatz
- zur Überbrückung von Disparallelität
- Versorgung mit Suprakonstruktionen auf Implantaten
- Hülse und Überfallring angießfähig

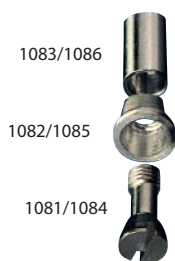

Maßstab 1 : 1	Gesamt- länge mm	Gewinde- durch- messer	Außen- durch- messer	Werkstoff Hülse Primär	Werkstoff Überfallring Sekundär	Artikel-Nr.
	5,0	1,4	2,0			6480 8990
	3,5	1,0	1,6			6480 8991

Einzelteile zu	Werkstoff	Artikel-Nr. 6480 8990	Artikel-Nr. 6480 8991
Hülse, (Pt-Ir)		6480 1083	6480 1086
Überwurfring, (Pt-Ir)		6480 1082	6480 1085
Schraube, Pd-Ag Basis (Alba O)		6480 1081	6480 1084



Hilfswerkzeug	Artikel-Nr.
Gewindenachschneider für Hülse von 8990	6480 5154
Gewindenachschneider für Hülse von 8991	6480 8992
Ausschraubinstrument für Bestell.-Nr. 8991	6480 8993
Schraubenzieher Labor	6480 8996
Schraubenzieher Praxis	6480 8997
Ausschraubinstrument für Artikel-Nr. 8990	6480 8998