




**Wurzelkappenanker**  
Resilientes Halteelement für Cover-Denture-Prothesen

Der Wurzelkappenanker ist ein aktivierbares, resilientes Halteelement, das sich auf Grund seiner Konstruktion besonders für Cover-Denture-Prothesen eignet. Durch die Aktivierbarkeit des Zapfens kann die Abzugskraft der Prothesen eingestellt werden. Der Wurzelkappenanker besteht aus einer angussfähigen Gewindekappe (HSL), einem austauschbaren Zapfen (Alba O) und der Matrize aus Alba O.

Maßstab 1 : 1	Abmessungen Höhe mm	Stärke der Montage- scheibe mm	Matrize Ø mm	Werkstoff Gewinde- kappe Primär / Sekundär	Zapfen	Matrize	Liefer- form	Artikel-Nr.
	3,6	0,5	3,2				2	6480 7600

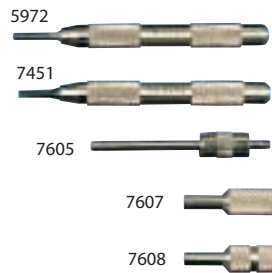

Hilfswerkzeuge	Artikel-Nr.
Gewindenachschneider für Gewindekappe	6480 5972
Aktivierinstrument für Patrize	6480 7451
Parallelhalter für Gewindekappe	6480 7605
Austauschinstrument für Patrize	6480 7607
Deaktivierinstrument für Patrize	6480 7608



Einzelteile	Werkstoff	Artikel-Nr.
Matrize, Pd-Ag Basis (Alba O)		6480 1068
Patrize Pd-Ag Basis (Alba O)		6480 1069
Gewindekappe, HSL (Heraplat)		6480 1070